


マリンコートリモ
& スカイコート用

移乗ストレッチャー ATB-7050B



外観図

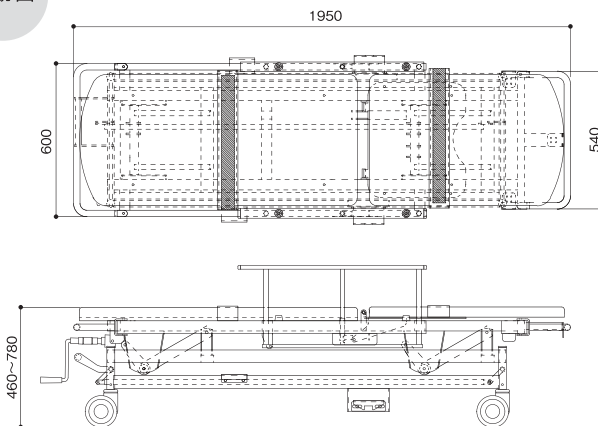

全長	1950mm
全幅	600mm(連結ブロックまで含むと645mm)
高さ	460～780mm
質量	約80kg
マット厚	35mm(背部)、50mm(本体部)
材質	スチールフレーム/粉体塗装仕上げ ガード部/クロムメッキ仕上げ
キャスター径	φ125mm
最大耐荷重	300kg(等分布荷重)
レザ	抗菌・防汚・耐アルコール/次亜塩素酸・難燃・ROHS

※本製品は浴室用ではありません。

レザカラー [18色よりお選びいただけます。]



レザの特性



耐アルコール機能 耐次亜塩素酸機能

薬品・化粧品類が付着しても硬化しにくい特性です。



抗菌機能

大腸菌等の繁殖を抑え、防止する特性です。



防汚機能

トップ層にフッ素加工を施し、汚れを落としやすい特性です。



難燃機能

表面燃焼試験B法 [JIS1091合格品]



RoHS対応

鉛やカドミウムを使用しない環境にやさしい特性です。

レザのお手入れについて

レザ機能を十分に発揮させ、衛生的にご使用いただくために、柔らかい清潔なウエス(布)でこまめに乾拭きしてください。また、洗剤には市販の専用クリーナー、または、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をご使用ください。

カラー・素材について

レザカラー18色以外のカラーやファブリック(布地)のご要望にもお応えいたします。お気軽にご相談ください。

写真印刷について

製品の色調は、出来る限り実物どおりの写真印刷に努めておりますが、多少異なる場合もございます。予めご了承ください。

■ 取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



株式会社アmano

本社 〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516

ホームページ <http://www.amano-grp.co.jp/>

アマノ 入浴

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(259)5611
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 東京東営業所 TEL.04(7126)7702
- 東京営業所 TEL.044(829)3091
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 名古屋営業所 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大阪支店 TEL.06(6380)5177
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(433)0931

AMANO
MEDICAL AND WELFARE INSTRUMENTS AND MACHINERY®

マリンコートリモ & スカイコート用 移乗 ストレッチャー

ATB-7050B



マリンコートリモ
& スカイコート用

移乗ストレッチャー
ATB-7050B

安全・安心設計でスムーズな移乗を実現したストレッチャー。

対応製品



STEP 1 アプローチ



STEP 2 ドッキング



ドッキングはスライドさせるだけで
連結するシンプル動作です。

STEP 3 スライド



サイドフェンスは
移乗する直前まで
あげておけるので
安心です。

※ラクラクスリムロングは別売です。



1 サイドフェンス
解除レバー

介助者がサイドフェンスを持たないと、ロック解除ができない安全設計です。



2 背中リクライニング
レバー

背中のリクライニングは、
好みの位置で止めら
れる無段階式です。




3 安全ベルト

マットと同色の安全ベルトが2本
装備されています。



4 マット

厚みと張りのあるマットは、お手入
れのしやすいビニルレザー仕上
げです。

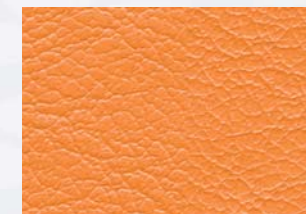

5 昇降ハンドル

上昇端の高さは、当社対応製品
のストレッチャーに合わせられ移
乗に便利です。



6 ロックペダル

キャスターロックは、「方向規制」
「フリー」「トータルロック」の3段階
です。

