

ReFlex

ハイローシャワーチェアー
リフレックス(電動タイプ) / 5100-5600

外形寸法	660(W)×1050(D)×935～1430(H)mm ※ヘッドレストを除く
座面寸法	460(W)×465(D)mm
座面高さ	485～1125mm
チルト角度	最大30°(無段階調整)
質量	約55kg
最大積載量	135kg
昇降装置	電動アクチュエータ
昇降回数	バッテリー1回充電あたり約100回(積載量70kgの場合)
材質	フレーム:スチール+コーティング/クッション:ポリウレタン
機能性能	高さ調節式フットレスト(ハネ上げ、着脱可能)、高さ調節式枕、ハネ上げ手すり、着脱式U字座部カバー、緊急停止機能、非常時下降機能

flexo

ハイローシャワーチェアー
フレキソ(油圧タイプ) / 5100-5199

外形寸法	700(W)×920(D)×920～1400(H)mm
座面寸法	470(W)×470(D)mm
座面高さ	490～1055mm
質量	約40kg
最大積載量	135kg
昇降装置	足踏み油圧式
材質	フレーム:スチール+コーティング/クッション:ポリウレタン
機能性能	自動チルト機構(下降端3°/上昇端15°)、ハネ上げ手すり、旋回ハネ上げフットレスト(着脱可能)、着脱式U字座部カバー

電動タイプ

主な消耗品とオプション



- 充電器
- ヘッドサポート(黒レギュラー)
- ヘッドサポート(黒スモール)

電動タイプ

油圧タイプ

オプション



※標準タイプのシートから付け替えが必要です。

Marina

シャワートロリー
マリナ(電動タイプ) / 6100-2360

外形寸法	2090(L)×860(W)×650～1120(H)mm
ベッド寸法	1900(L)×650(W)×200(H)mm
ベッド高さ	470～950mm
質量	約79kg
最大積載量	180kg
昇降装置	電動アクチュエータ
昇降回数	バッテリー1回充電あたり約150回(積載量70kgの場合)
材質	フレーム:アルミニウム/担架板:ABS樹脂/マットレス:PVC
機能性能	チルト機構(ガスシリンダー式)、開閉式サイドフェンス、枕、排水ホース、セミータルロックキャスター(2輪同時ロック機構)、緊急停止機能、非常時下降機能

Marina

シャワートロリー
マリナ(油圧タイプ) / 6100-2310

外形寸法	2090(L)×860(W)×650～1135(H)mm
ベッド寸法	1900(L)×650(W)×200(H)mm
ベッド高さ	470～965mm
質量	約75kg
最大積載量	180kg
昇降装置	足踏み油圧式
材質	フレーム:アルミニウム/マットレス:PVC / 担架板:ABS樹脂
機能性能	チルト機構(ガスシリンダー式)、開閉式サイドフェンス、枕、排水ホース、セミータルロックキャスター(2輪同時ロック機構)

電動タイプ

主な消耗品




- 充電器

電動タイプ

油圧タイプ

主な消耗品

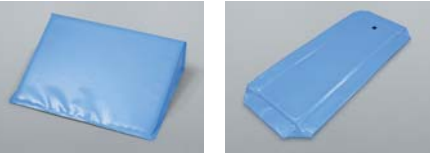

- 三角枕
- マットレス



- 排水ホース

定期点検のご案内 安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

■ 取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



本社 〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516

ホームページ <http://www.amano-grp.co.jp/>

アマノ 入浴

検索

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(259)5611
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 東京東営業所 TEL.04(7126)7702
- 東京営業所 TEL.044(829)3091
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 名古屋営業所 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大阪営業所 TEL.06(6380)5177
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(433)0931

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用の前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●定期的に機器の点検を行ってください。 ●この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございますと感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

RKS.1603.3000

ハイローシャワーチェアー

電動タイプ

ReFlex

リフレックス
5100-5600

&

油圧タイプ

flexo

フレキソ
5100-5199

シャワートロリー

電動タイプ

Marina

マリナ
6100-2360

&

油圧タイプ

Marina

マリナ
6100-2310



AMANO
MEDICAL AND WELFARE INSTRUMENTS AND MACHINERY

シャワーだけだからこそ備えておきたい“ポイント”があります。



ReFlex

ハイローシャワーチェアー
リフレックス／5100-5600

電動
タイプ



flexo

ハイローシャワーチェアー
フレキシソ／5100-5199

油圧
タイプ

Marina

シャワートロリー
マリーナ／6100-2360

電動
タイプ



Marina

シャワートロリー
マリーナ／6100-2310

油圧
タイプ



POINT 1 最適な高さ!

※写真は油圧タイプ



▶昇降操作も簡単

電動
タイプ

手元のスイッチで
昇降させます。



万一の故障時も
付属のハンドルで
手動対応可能。

※電動タイプのみです。


油圧
タイプ

足元のペダルを踏んで
昇降させます。



POINT 2 最適な姿勢保持!

※チルト機能は電動タイプのみ

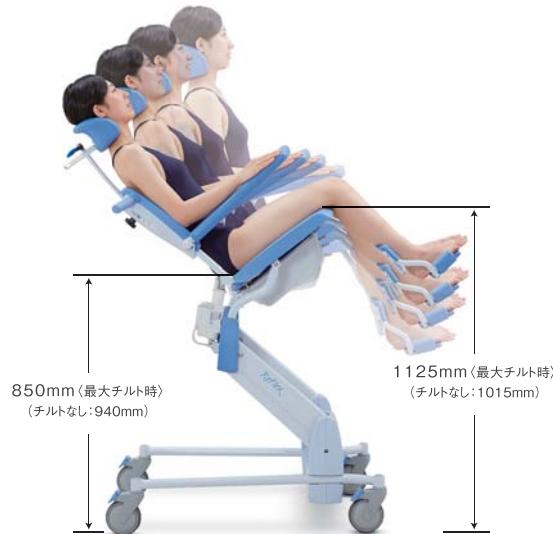

▶足元のケアや洗髪も 自然な姿勢で

高さは無段階に調整が
可能です。コミュニケー
ションから足先のケア・
洗髪まで自然な姿勢で
の介助ができます。



洗 髪



足先の
ケア



POINT 3 最適なサイズ!

耳を圧迫しないヘッド
サポートや小児用の座
部。より快適な座り心
地のクッションシートな
ど、豊富なオプションを
ご用意しております。



※枕は油圧タイプには取付
できません

装着例

電動タイプ

やわらか
クッション
背中+座部

電動タイプ

スモールシート
+
やわらかクッション
(スモールシート用)

油圧タイプ

やわらか
クッション
背中+座部

油圧タイプ

スモール
シート

オプションについて詳しくは裏面をご覧ください。

POINT 1 最適な高さ!

※写真は電動タイプ



▶昇降操作も簡単

電動
タイプ

リモコン(有線式)で
高さを調節します。



油圧
タイプ

ペダルで高さを
調節します。



POINT 2 移乗もらくらく!

サイドが開き、移乗もスムーズです。



▶サイドフェンスは 安全な二重ロック式

ベッドの側面はやわらか
なマットで四方を囲い安
心です。サイドの開閉は、
ロック解除とフェンスを上
げる二重ロック式です。



POINT 3 お湯につかれる!

水深6cm程度まで貯められます。



▶シャワー + 湯貯め

シャワーだけが入浴の選択肢になる場合、身体の
背面だけでもお湯につかっていただく事には価値
があります。+aのシャワー入浴をお楽しみください。

▶チルト機能で排水効率も向上

チルト機能を使う事でシャワーしたお湯も素早く
排水します。

● チルト有状態



● チルト無状態

